

MOSTRA PER LA DETERMINACIÓ DE PARÀSITS

Material

3 tubs transparents amb líquid al seu interior

3 culleretes verdes unides a un tub cònic

Instrucciones de uso


1. Recollir els excrements en un recipient net i sec (falca, orinal o similar o bossa de plàstic neta), que no tingui restes de sabons ni desinfectants. **No fer servir excrements contaminats amb aigua, orina o paper higiènic.**

2. Descargolar el tap de l'envàs que conté líquid i col·locar-lo en una superfície plana per evitar vessaments. **Rebutjar el tap.**

3. Utilitzar la cullereta verda que està unida al tub cònic per agafar una mostra del centre de la femta sense que quedin restes de mostra a l'exterior de la cullereta.

4. Introduir la **cullereta amb mostra de femta** dins de l'envàs amb líquid (**NO separar la pala del tub cònic** que porta a la part posterior) i tancar enroscant fortament. Conservar a temperatura ambient (NO en frigorífic) amb l'extrem cònic cap amunt fins que es lliuri al laboratori o centre de salut.

5. Rentar-se bé les mans amb aigua i sabó

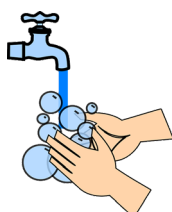

¡importante!



El contenido líquido de los recipientes es tóxico (solución SAF). **NO INGERIR.**

Mantener fuera del alcance de los niños.

En caso de ingestión accidental, beber gran cantidad de leche o agua y llamar al Servicio de Información Toxicológica: 91 562 04 20.

Si el contenido líquido entra en contacto con piel, ojos y mucosas, lavar con abundante agua y consultar inmediatamente con un servicio médico.



6. Cal recollir un total de **3 mostres de femta de dies diferents i consecutius**. Repetir els passos de l'1 al 5 per a cada presa de mostres.

